




ERGON SUTRAMED®

PRODUZIONE ITALIANA
SUTURE CHIRURGICHE


DARVIN LOC[®]

Knotless Suture

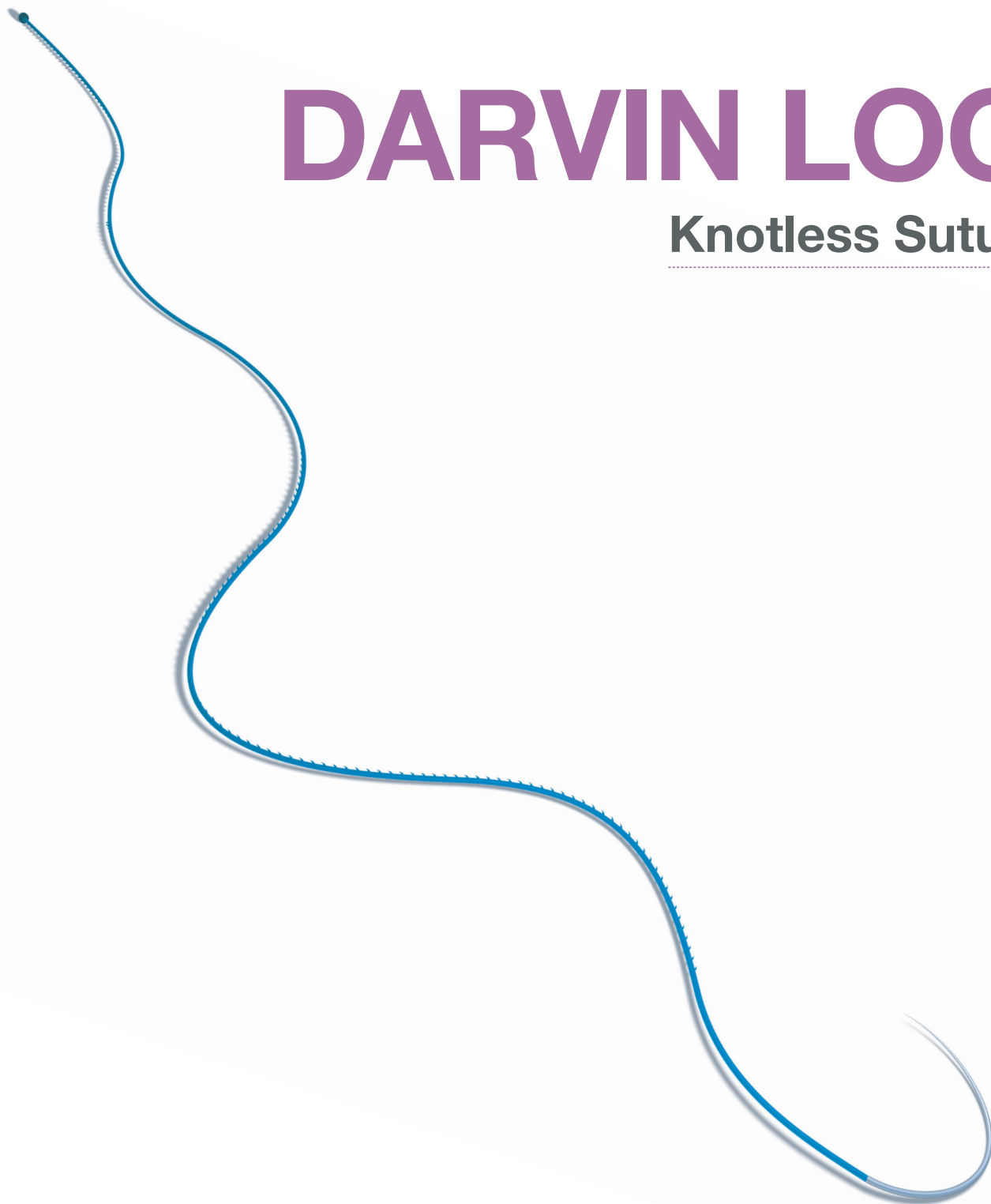


#madeinItaly
CE 0373


DARVIN LOC®

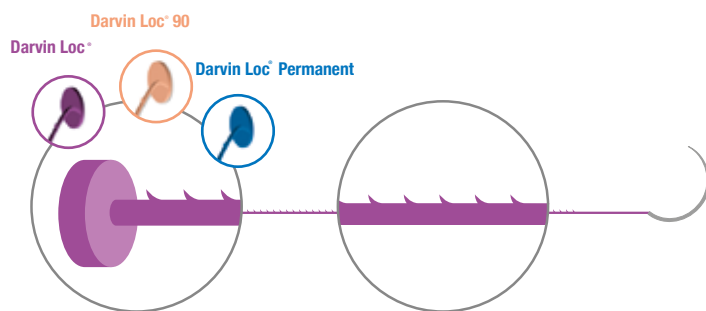

Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final

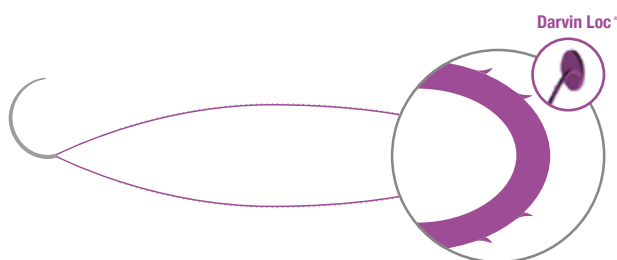

Loop • Boucle • Lazo

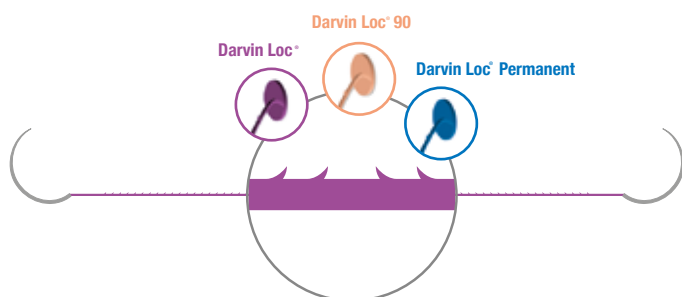

Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

🇮🇹 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

🇬🇧 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

🇫🇷 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

🇪🇸 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

DARVIN LOC®

🇮🇹	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
🇬🇧	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
🇫🇷	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
🇪🇸	cirugía laparoscópica y robótica	cirugía general	cirugía plástica y reconstructiva	cirugía ginecológica y urológica	cirugía ortopédica

**MOLECOLA**

Poli
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento
dentellata assorbibile

COLORE

Viola o non colorato
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2.
Il Darvin Loc® 90 viene
assemblato con aghi
atraumatici in acciaio inox
AISI 300 o AISI 400

RESISTENZA TENSILE

7 gg ~ 50%
14 gg ~ 20%

ASSORBIMENTO

Completo in 90-120 giorni
dall'impianto

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei
tessuti molli e/o dove sia
richiesta una sutura a medio
assorbimento

**COMPOSITION**

Poly
(glicolide-co-ε-caprolattone)

DESCRIPTION

Synthetic monofilament
absorbable barbed suture

COLOUR

Violet or undyed
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2.
Darvin Loc® 90 is attached to
AISI 300 or AISI 400 stainless
steel atraumatic needles

TENSILE STRENGTH

7 days ~ 50%
14 days ~ 20%

ABSORPTION

Complete within 90-120 days

INDICATIONS

In soft tissues approximation,
where a mid absorption of the
suture is required

**MOLÉCULE**

Poly
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TYPE DE FIL

Suture synthétique monofila-
ment crantée résorbable

COULEUR

Violet ou incolore
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**CHARACTÉRISTIQUES
STANDARDS**

EP de 1,5 à 5 ;
USP de 4/0 à 2.
Le Darvin Loc® 90 est
assemblé avec des aiguilles
atraumatiques en acier inox
AISI 302, ou AISI 420

TEMPS DE RÉSISTANCE

7 jours ~ 50%
14 jours ~ 20%

TEMPS DE RÉSORPTION

Complète entre le 90-120ème
jours

INDICATIONS

Dans le rapprochement des
tissus mous, lorsqu'une
résorption moyenne de la
suture est nécessaire

**MOLÉCULA**

Poli
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible
monofilamento dentada

COLOR

Violeta o incoloro
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2.
La sutura Darvin Loc® 90 se
presenta montada con agujas
atraumáticas de acero
inoxidable AISI 300 o AISI 400

FUERZA TENSIL

7 días ~ 50%
14 días ~ 20%

ABSORCIÓN

Completa a los 90-120 días

INDICACIONES

En la aproximación de los
tejidos blandos y donde se
necesita una absorción media
de la sutura




DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

90 - 120

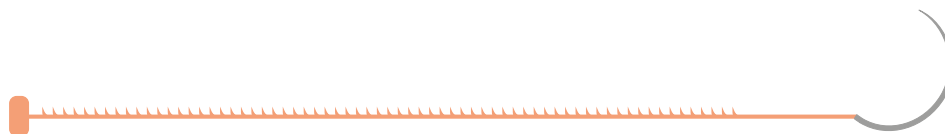

⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  17	■ 15		DH400HHFAB					
	□ 15		DH400HHFWAB					
	■ 20			DT77CHHFAC				
	□ 25		DH400HHFWAD					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	■ 15		DH397HHFAB					
□ Non colorato, Undyed Incolore, Incoloro  25	□ 20				DL917HHFWAC			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	■ 15		DH395HHFAB	DT412HHFAB				
	□ 15		DH395HHFWAB					
	■ 20			DT412HHFAC				
	□ 20			DT412HHFWAC				
	■ 25		DH395HHFAD	DT412HHFAD				

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP	1,5	2	3	3,5	4
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  26	□ 25			DH395HHFWAD			
	■ 30			DH395HHFAE			
	■ 45				DT412HHFAH		
□ Non colorato, Undyed Incolore, Incolore  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	□ 15			DT797HHFWAB			
	□ 25			DT797HHFWAD			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  30	■ 20			DH246HHFAC	DT248HHFAC		
	■ 25			DH246HHFAD			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  37 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 30				DT464HHFAE		

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■	EP 1,5	2	3	3,5	4	5		
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2		
	15		DH429HHFAB						
	■								
	20		DH429HHFAC						
■									
25		DH429HHFAD							
■									
30		DH429HHFAE							

♥ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
			EP	1,5	2	3	3,5	4	5
			USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17			■ 		DH978HHFAB				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26			■ 		DH968HHFAB				
			■ 		DH968HHFAD				
			□ 		DT979HHFWAD				

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO				
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 18	15 60	EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
				DH991HHFAB				
				DH991HHFWAM				

3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO				
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐	EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 16				DE520HHFWAH				
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐							
 19				DH38EHFWAE				
	☐							
 24				DE526HHFWAH	DH38EHFWAH			
	☐							
 24				DE523HHFWAH	DH871HHFWAH			
	☐							
 24				DH871HHFWAM				
	☐							

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
				EP	1,5	2	3	3,5	4	5
				USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐		45	DH530HHFWAH						
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐		20	DE533HHFWAC						
	☐		25	DH534HHFWAD						
	☒		30	DH534HHFAE	DT540HHFAE					
	☐		45	DH534HHFWAH						

⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO			
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 17	30						
	32						
	35		DH400KHFWAF	DT77CKHFWAF			
	45			DT77CKHFWAH			
	30		DH395KHFAE	DT412KHFAE			
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 26	30			DT412KHFWAE			
	35			DT412KHFWAF			

⊙ 3/8 C. CILINDRICO • TAPER 3/8 C. • RONDE 3/8 C. • CILÍNDRICA 3/8 C.

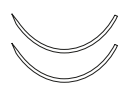AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐ 30		DH991KHFWAE					
 18	☐ 60		DH991KHFWAM					


DARVIN LOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE


FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

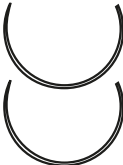AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 32			DT430KHFAF				
	■ 50		DH066KHFAI					

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

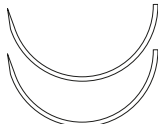AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■ 35		DH978KHFAF					
	■ 45		DH978KHFAH					
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	☐ 30				DL231KHFWE			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	■ 60					DM07EKHFAM		

DARVIN LOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore 18	10			DH850KHFAA				
	15			DH850KHFAB				
	25			DH850KHFAD				
	30			DH850KHFAE				
	30			DH850KHFWE				
	60			DH850KHFAM	DT04GKHFAM			
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore 26	25				DT05GKHFAD			
	30					DL06GKHFAE		
	60				DT05GKHFAM			
	75			DH847KHFWAQ				

3/8 C. TRIANGOLARE PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  19	☐  60			DH38EKHFWAM				

DARVIN LOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP	1,5	2	3	3,5	4
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  12	☐  30		DE524KHFVAE				
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	☐  15			DH530KHFVAB			
	☐  30			DH530KHFVAE	DT108KHFVAE		
	☐  60			DH530KHFVAM			
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  24	☐  60			DH534KHFVAM			
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	☒  15				DT886KHAB		
	☐  30				DT886KHFVAE		
	☐  60				DT886KHFVAM		



ERGON SUTRAMED®

PRODUZIONE ITALIANA
SUTURE CHIRURGICHE

Italia

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

France

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

España

Poligono Ind. Mutilva Baja
Calle V, n.16 - 31192
Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

Germany

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

Russian Federation

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

Brasil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP
22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

Algerie

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

Tunisie

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis- Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

Maroc

Résidence Azhar, 24,
Rue Jalal Eddine Essayauti,
Rez De Chaussée n°2
20100 Casablanca, Maroc

www.ergonsutramed.com
info@ergonsutramed.com

