



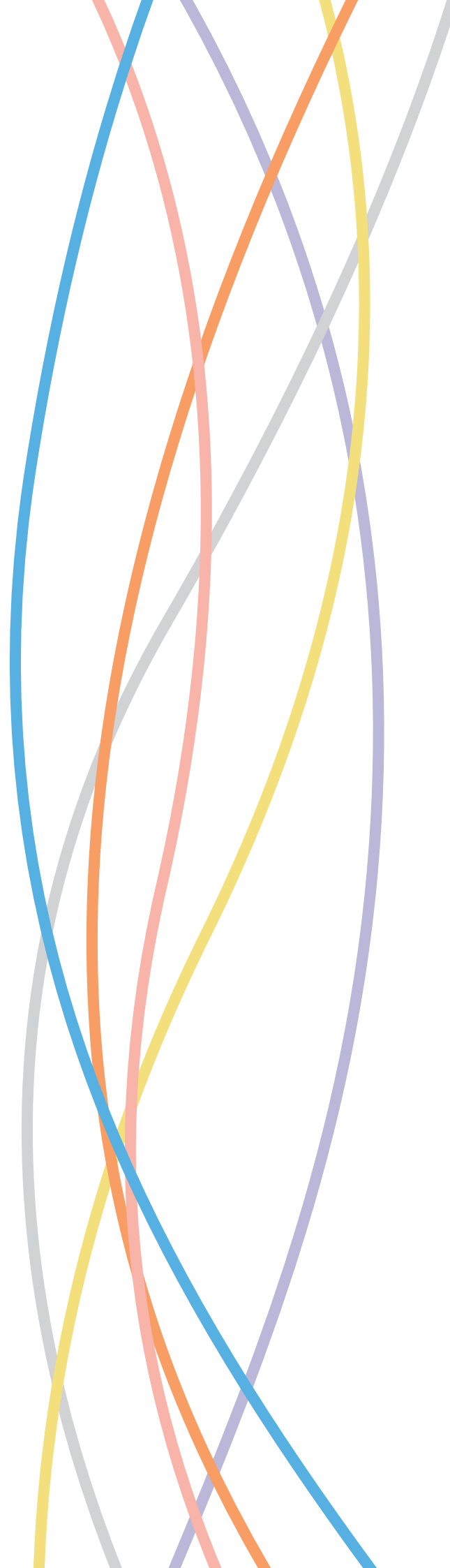


SUTURE ASSORBIBILI
ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS ABSORBIBLES

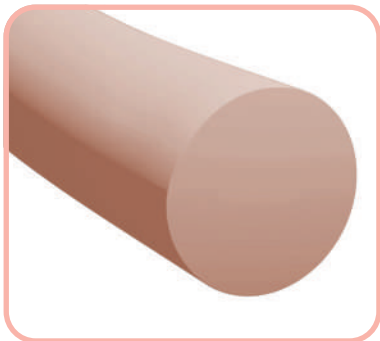

Sutura sintetica monofilamento a rapido assorbimento (50-60 giorni)

Synthetic monofilament suture short term absorption (50-60 days)

Sutura sintética monofilamento de absorción rápida (50-60 días)

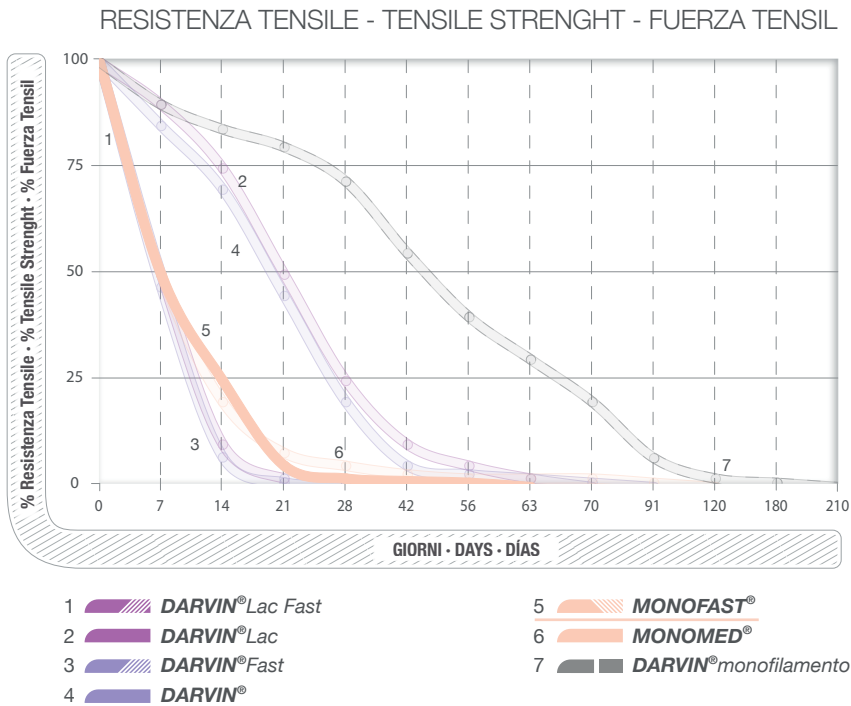



MOLECOLA

Poli (glicolide-co-ε-caprolattone).

TIPO DI FILO

Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapido assorbimento.

COLORE

Non colorato.

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4.
Monofast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

RESISTENZA TENSILE

Dopo 5 gg dall'impianto permane ~ 48-55% della resistenza tensile, dopo 10 gg ~ 25% della resistenza tensile, dopo 20 gg ~ 2% della resistenza tensile.

ASSORBIMENTO

Completo entro 50-60 giorni dall'impianto.

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento rapido della sutura.



COMPOSITION

Poly (glycolide-co-ε-caprolactone).

DESCRIPTION

Synthetic monofilament short term absorption suture.

COLOUR

Undyed.

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.
Monofast is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

TENSILE STRENGTH

After 5 days from implant ~ 48-55% of the tensile strenght remains, after 10 days ~ 25%, after 20 days ~ 2%.

ABSORPTION

Complete within 50-60 days.

INDICATIONS

In soft tissues approximation, where a fast absorption of the suture is required.



MOLÉCULA

Poli (glicólida-co-ε-caprolactona).

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible monofilamento de absorción rápida.

COLOR

Incoloro.

DIÁMETRO Y AGUJAS

Diámetro EP de 0,2 a 6; USP de 10/0 a 3&4.
Monofast se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.

FUERZA TENSIL

Después de 5 días de implantación mantiene ~ 48-55% de la fuerza tensil, ~ 25% después de 10 días, ~ 2% después de 21 días.



ABSORCIÓN

Completa a los 50-60 días de la implantación.

INDICACIONES

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una absorción rápida de la sutura.

☉ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

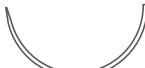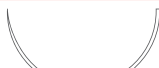AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 17	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD375Q	36
 HR 22	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE389Q	36
 HR 26	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD378Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE386Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH395Q	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE802Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH799Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT797Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	1	4	DL801Q	36
 HR 30	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH246Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT248Q	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	3 - 0	2	DE798Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	2 - 0	3	DH440Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT464Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL465Q	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH800Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT445Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL458Q	12
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT414Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL479Q	12

● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 64	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	1	4	DL887Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT730Q	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD515Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE516Q	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE533Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH534Q	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	DB484Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC487Q	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	DB488Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC489Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD492Q	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC505Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD812Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE526Q	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD522Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE523Q	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH871Q	36

⊙ 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH429Q	36

FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incoloro	6 x 45	2 - 0	3	DHPQ	12

KIT PER EPISIORRAFIA - EPISIOTOMY REPAIR - KIT PARA EPISIOTOMIA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 24	3/8 C. Triangolare - Cutting Edge 3/8 C. - Triangular 3/8 C. Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	KEP101Q	12
 HRS 40 - rinforzato, heavy, reforzada	1/2 C. Taper-Cutting - Taper-Cutting 1/2 C. Taper-Cutting 1/2 C. Non colorato - Undyed - Incoloro	2x90	0	3,5		

FILI LIBERI - NON NEEDLED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina	Non colorato - Undyed - Incoloro	150	3 - 0	2	DEQ	12
	Non colorato - Undyed - Incoloro	150	2 - 0	3	DHQ	12
	Non colorato - Undyed - Incoloro	150	0	5	DTQ	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril

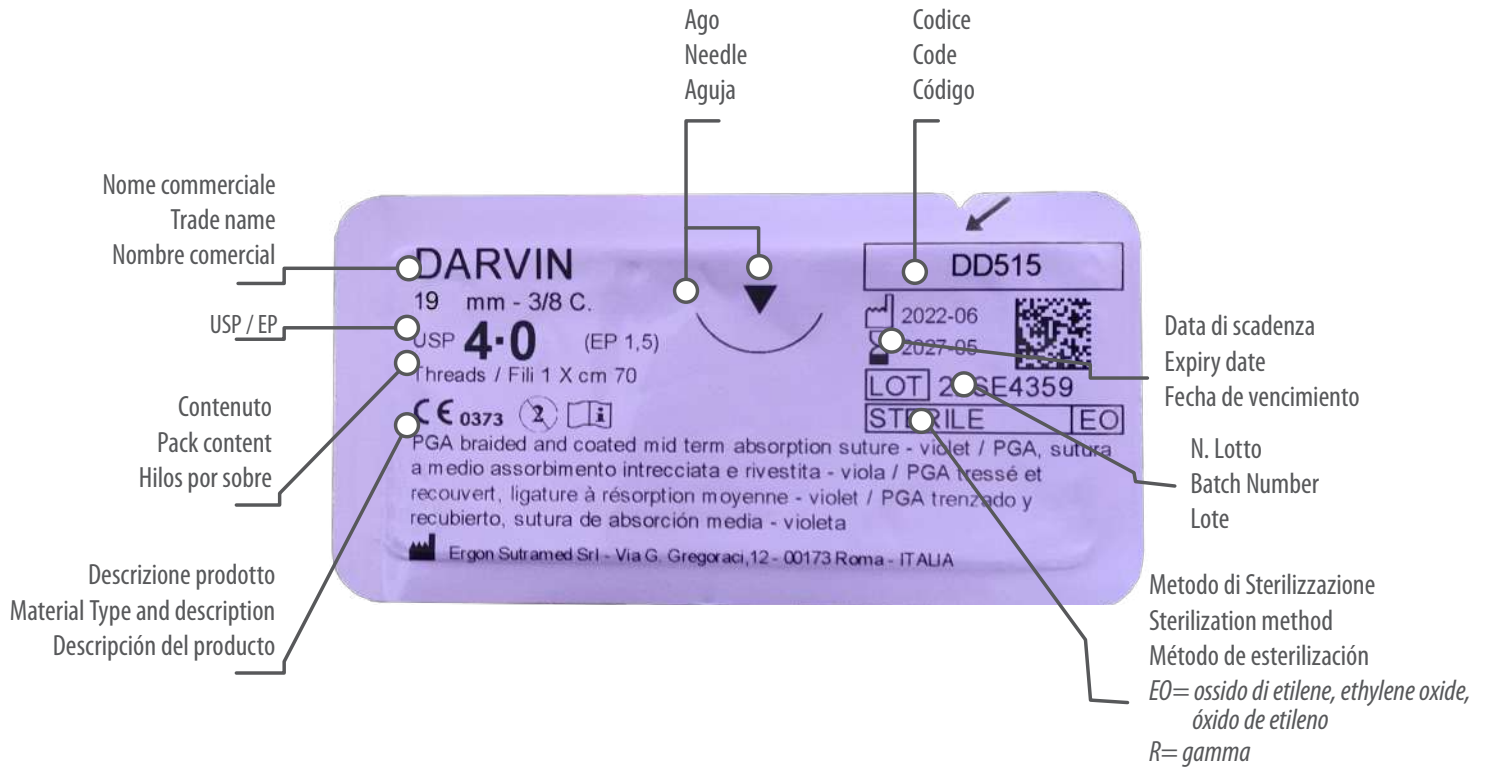

CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO

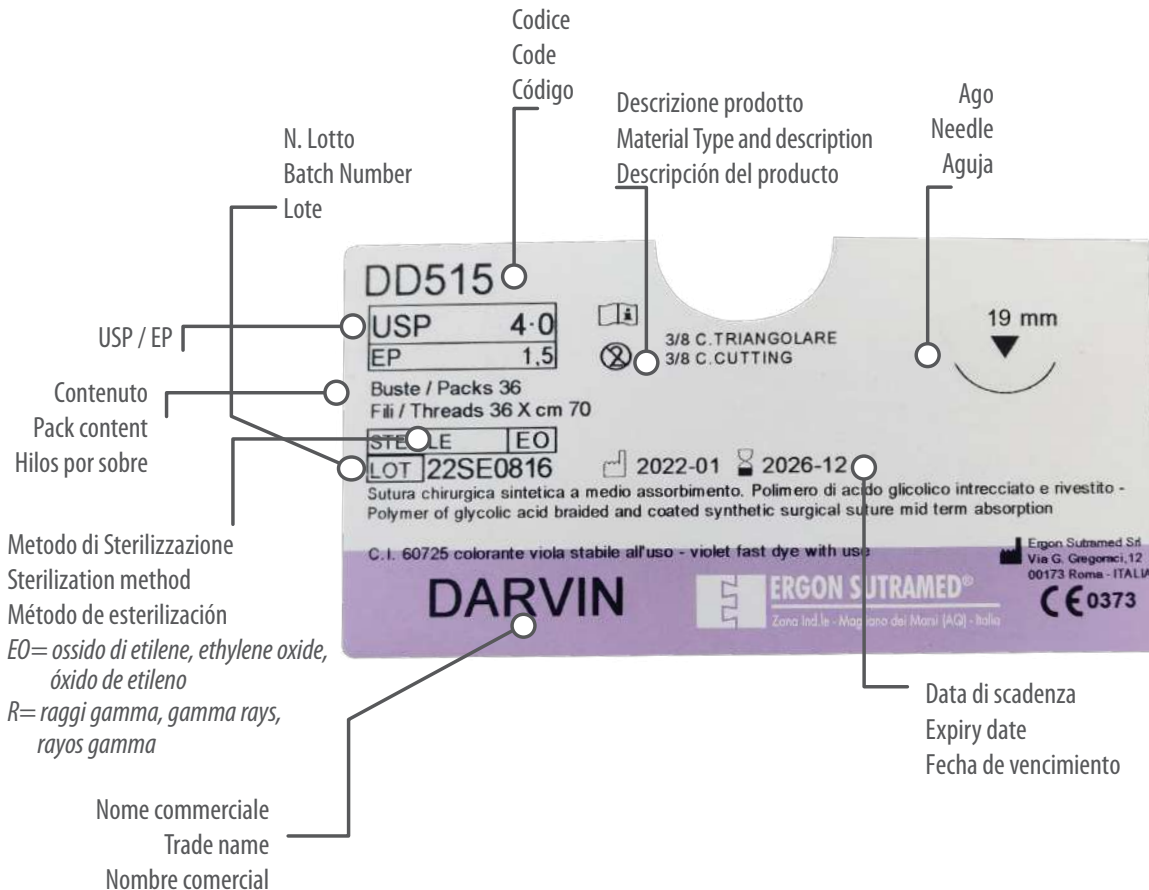

TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS

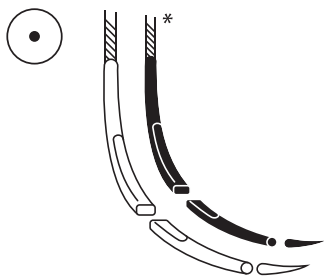

AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja

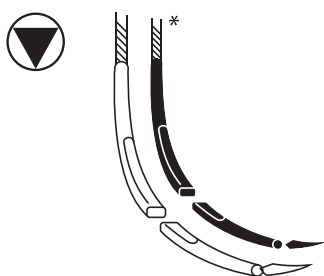

TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo

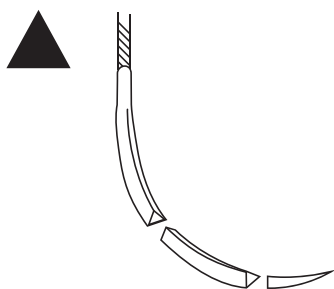

AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno

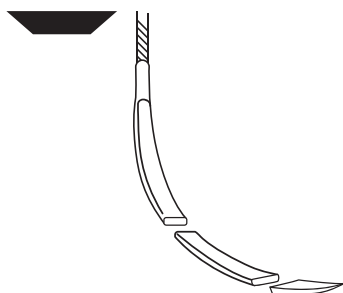

AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra

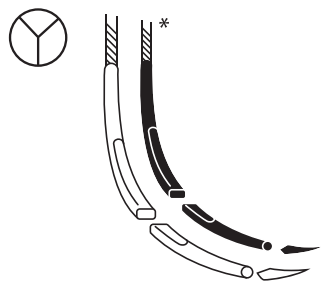

AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas

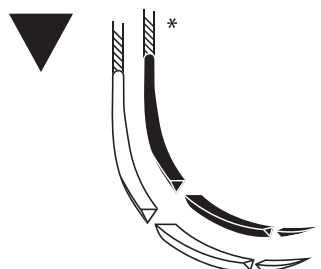

AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo

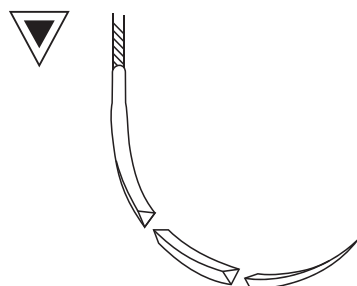

AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante

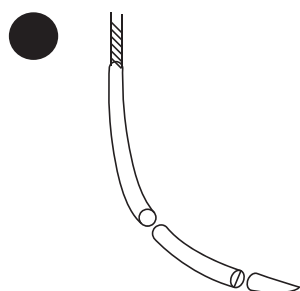

AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa


BLUNT TIP NEEDLES

Round needles with a blunt tip


AGUJAS CON PUNTA ROMA

Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.

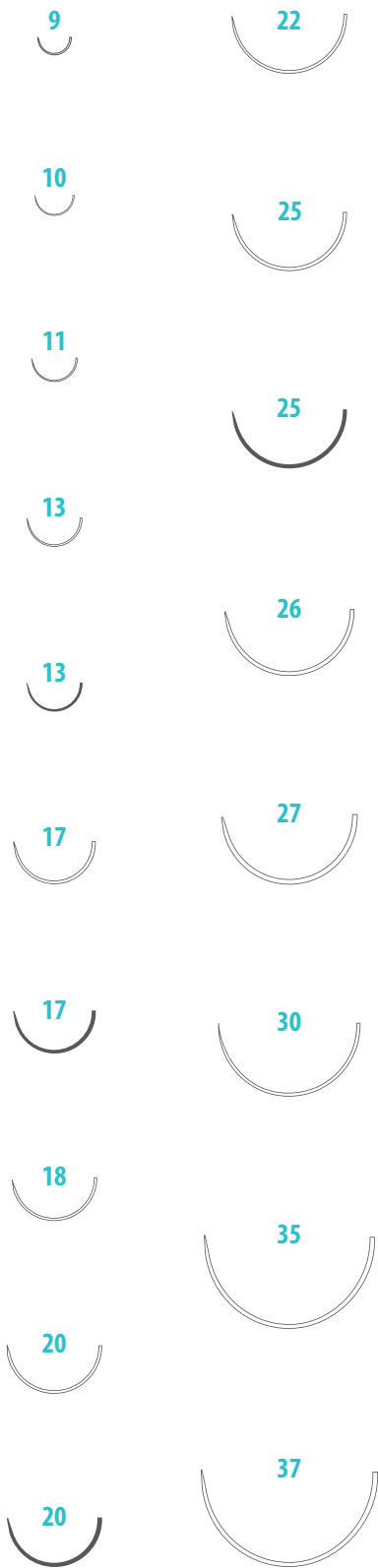

• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.

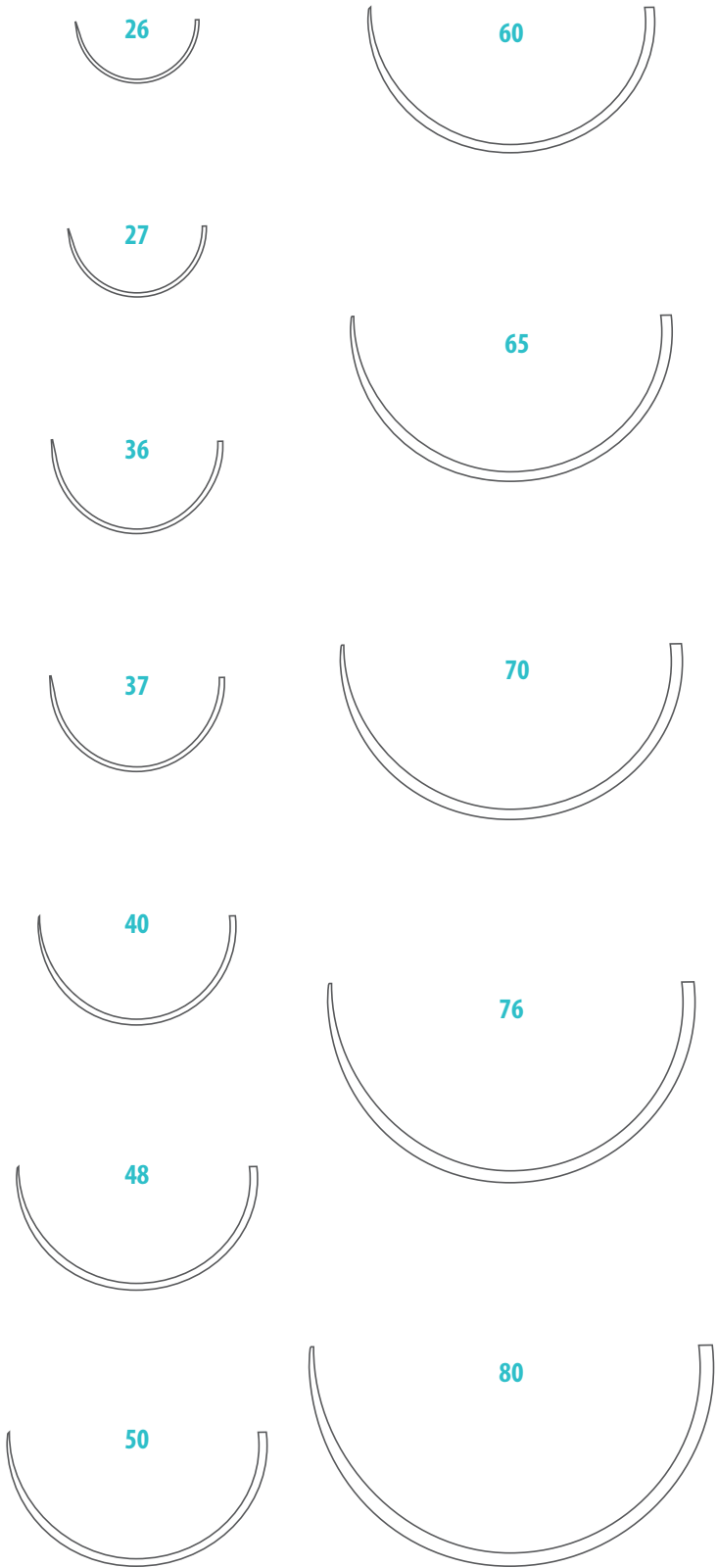


⊙ DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.

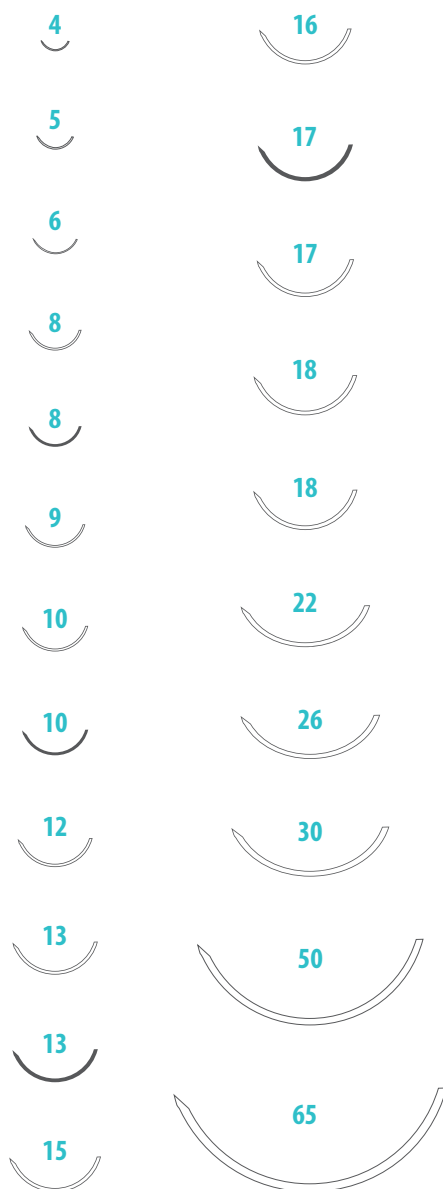

▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




⊙ FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.

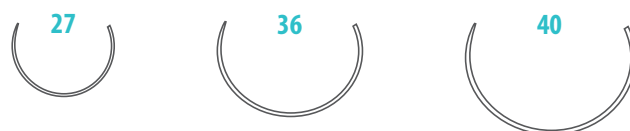


⊙ JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J

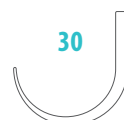


⊙ GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA

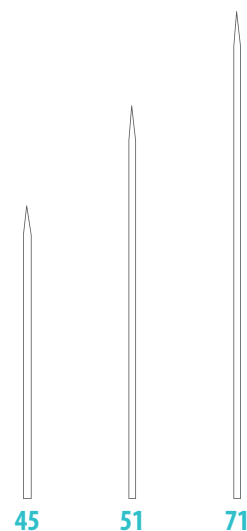


▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.

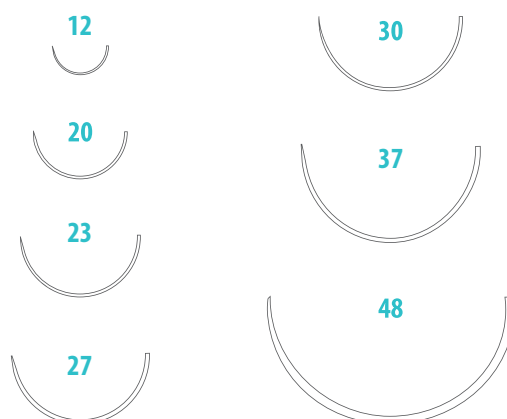

▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.

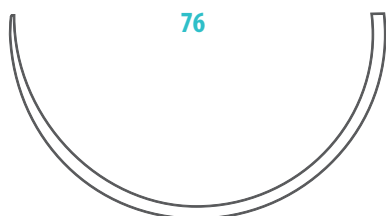

▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS

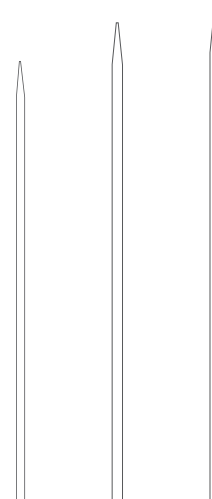


51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.

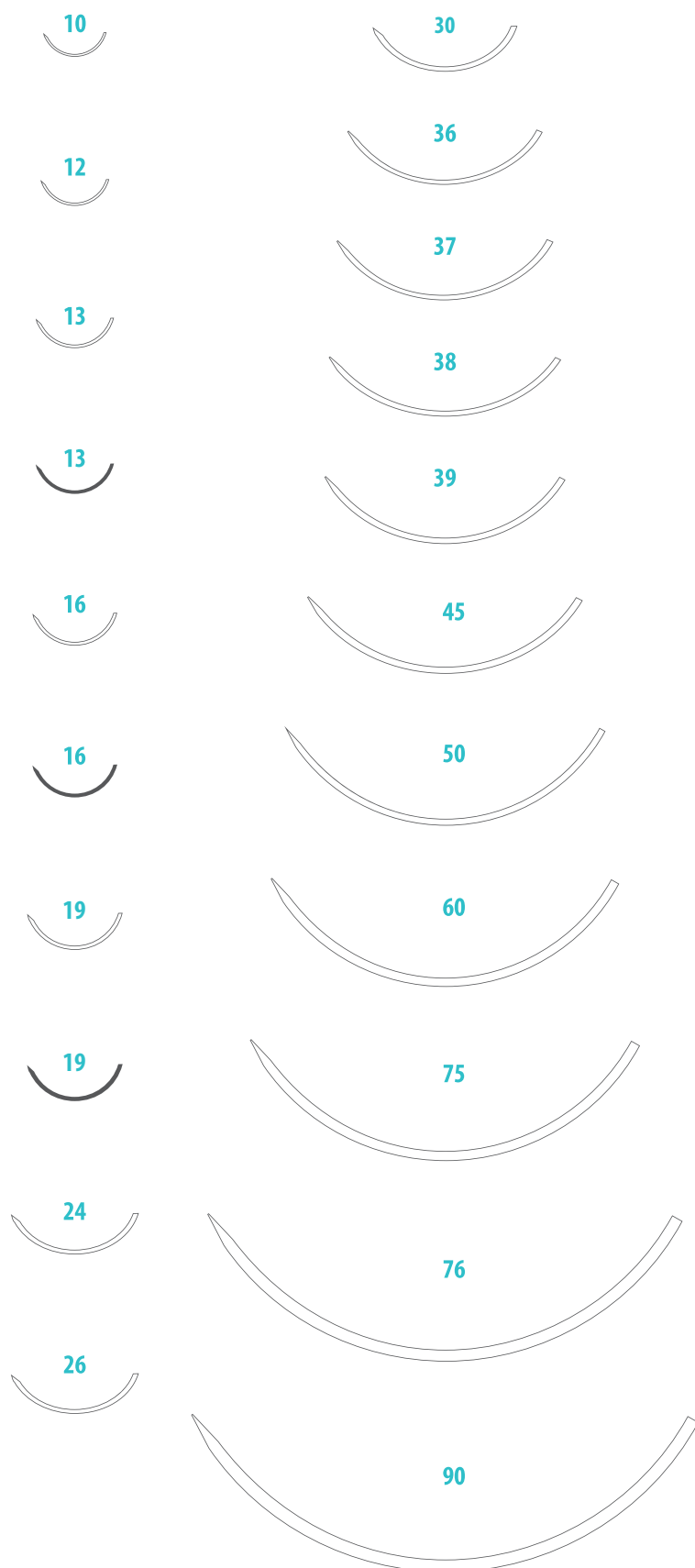


▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.

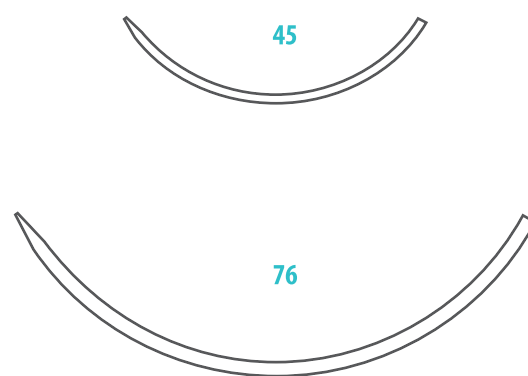

● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

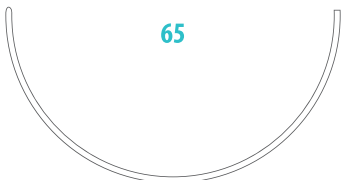

▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.

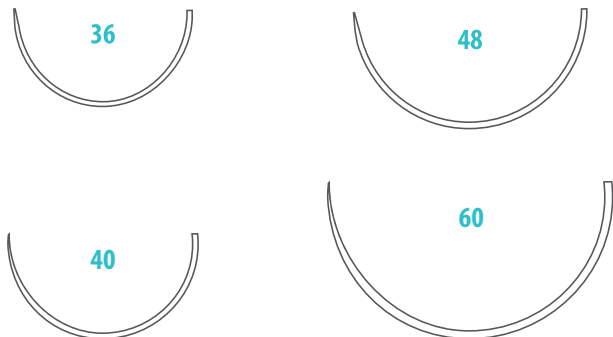

⊙ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.

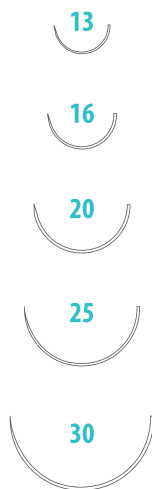


⊙ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.

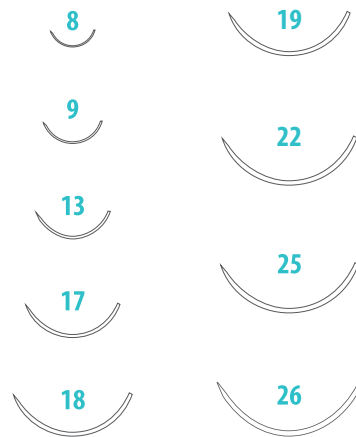

▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J

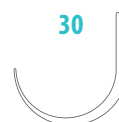

▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

